



מכשיר נייד לשטיפת פה

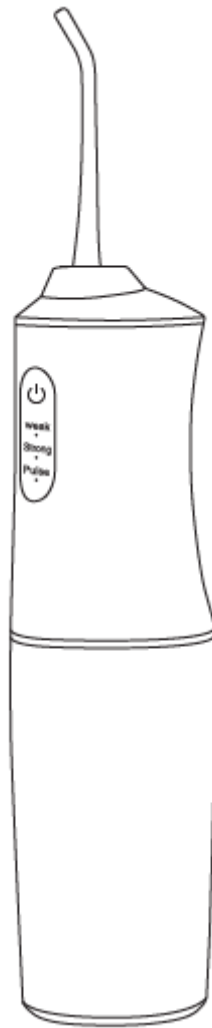

היבואן: ג.ע טכנולוגיות (2020) בע"מ
ח.פ 516177144

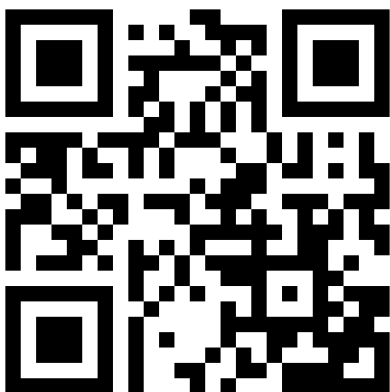

לתעודת אחריות מלאה אנא
סירקו את הברקוד

מדריך למשתמש

הגבלת אחריות: עקב שינויים במראה המוצר, אם יש הבדל כלשהו בין המראה שלו במדריך זה לבין מראהו בפועל, יש לעיין במוצר עצמו

פונקציית המוצר

- מים בפולסים חזקים יכולים לנקות חיידקים, כתמי שיניים, אבנית ושאריות מזון בכל חלקי הפה.
- זרימת מים עדינה יכולה לנקות חריץ חניכיים וחריצים עמוקים ללא חסימה ולשפר את בריאות החניכיים.
- אם ילדים, קשישים או מפעילים אחרים מעוניינים להשתמש במוצר זה, יש לוודא שאדם הבקיא במוצר מפקח ומנחה את המשתמש.
- ניקוי פה מהיר: בין אם זה בבית או באכילה בחוץ, זוהי הדרך היעילה ביותר לשקם במהירות את הפה ולהשיב אותו למצב נקי.
- עבור שיניים אורתודונטיות, השתלות שיניים, ניקוי ציפוי שיניים משפיע לטובה.
- מסייע בפיתוח הרגל בריא של ניקוי יומיומי בין השיניים, כך שתמיד תשמרו על שיניים נקיות ובריאות.

לתשומת לבכם

סכנה



- יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש כדי למנוע פציעה או נזק עקב מהפעלה לא נכונה.
- אין לפרק את המוצר ללא רשות, למניעת נזק למוצר או התחשמלות.
- אין להשתמש במים עם יותר מ-40 מעלות צלזיוס לשטיפת שיניים במיכל המים, למניעת כוויות.
- אם המוצר נופל בטעות למים בעת הטעינה, יש להוציא תחילה את תקע החשמל ולאחר מכן להוציא את המוצר מהמים, ולאחר מכן לטעון אותו לאחר שכתמי המים יבשים לחלוטין.
- אם כבל החשמל או התקע פגומים, יש להחליף את מתאם החשמל.
- יש לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות. אין לחשוף את המוצר לאש. הסוללה עלולה להתפוצץ.

אזהרה



- אין להשתמש במוצר לשום מטרה אחרת מלבד ניקוי הפה.
- אין ללחוץ את הפיה על החניכיים או השיניים, למניעת נזק לחניכיים.
- אין לטבול את המוצר במים, שכן הדבר עלול לגרום לכשל בפעולתו.
- אין להשתמש במוצר בטמפרטורה גבוהה ובסביבה לחה.
- אם כבל החשמל פגום, אין להמשיך להשתמש בו.

שימו לב



- א. אין להשתמש במוצר זה מבלי להתקין את הפיה.
- ב. חלק מתכשירי שטיפות הפה עלולים להיות מאכלים. יש לבדוק את הרכב תכשיר שטיפת הפה לפני השימוש. איין תשתמש בתכשירים כאלה ללא הבחנה.
- ג. אם ילדים, קשישים או מפעילים אחרים מעוניינים להשתמש במוצר זה, יש לוודא שאדם הבקיא במוצר מפקח ומנחה את המשתמש.
- ד. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים ותינוקות, ואין להשתמש בו כצעצוע.
- ה. אנשים הלוקים במחלת חניכיים או שעברו ניתוח פה בחודשיים האחרונים או סבלו מבעיות פה, נדרשים להתייעץ תחילה עם הרופא ולהשתמש במוצר אך ורק לאחר אישורו.

שימו לב



- א. אין להשתמש במהירות חזקה לשטיפה רציפה שח החניכיים הפגומות, הדבר עלול לגרום לדימום או לדלקת בחניכיים.
- ב. יש להתאים את עוצמת המים הפועמים בהתאם למצב חלל הפה שלך בזמן אמת.

שימו לב




- א. אין לטבול את המכשיר כולו במים, שכן הדבר שעלול לגרום לכשל בו ואף לנזק מוחלט.
- ב. אם אינך משתמש/ת במוצר זה במשך זמן רב, יש לוודא שמיכל המים יבש וללא מים, ולאחר מכן לאחסן אותו כדי למנוע צמיחה של חיידקים.


פרטי המוצר

מתח נקוב: 5 וולט
הספק נקוב: 5W

מס' פריט: 6886
משקל נטו: 249 גרם
קיבולת מכל המים: 220 מ"ל

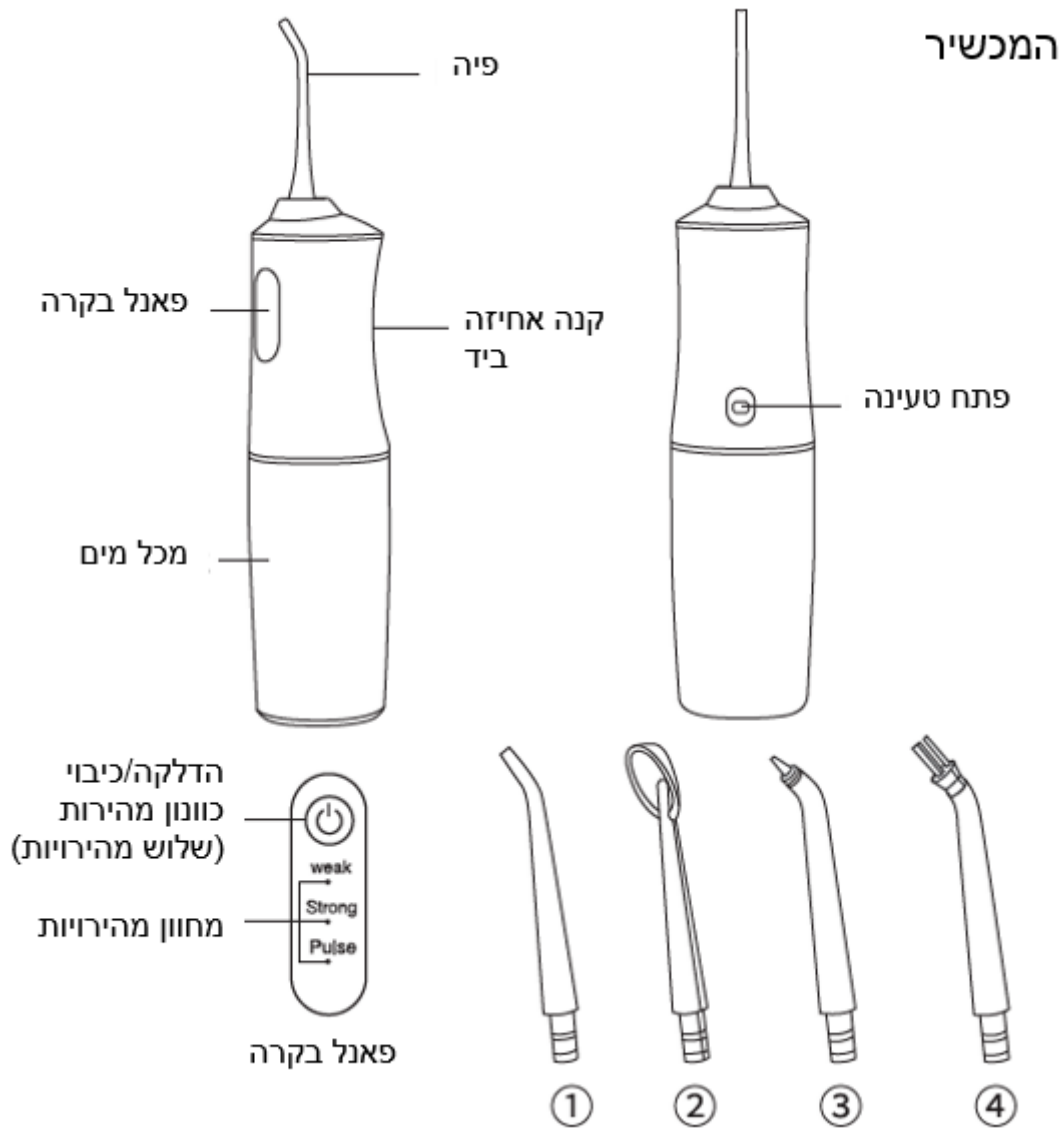

1. פיות סטנדרטיות מתאימות לניקוי יומיומי.
2. פיית כיס פריודונטלית. מיוחד לניקוי כיסי החניכיים
3. פיית ציפוי לשון. מיוחד לניקוי ציפוי לשון.
4. פיה אורתודונטית. מתאים לניקוי רצועות שיניים

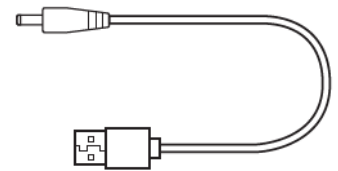

כבל טעינה

תחזוקה שוטפת

- א. לניקוי המוצר, יש לנגב אותו במים או במטלית רטובה, ולאחר מכן לנגב את כתמי המים על פני השטח עם מטלית יבשה או מגבת נייר יבשה אחרת.
- ב. אין לטבול את המוצר במים.
- ג. אין לשטוף את המוצר במים חמים מעל 50 מעלות צלזיוס.
- ד. אין לכופף, למתוח או לסובב את צינור המים של הפיה.
- ה. מומלץ להחליף את הפיה מדי כל שלושה חודשים.
- ו. אם אינך משתמש במוצר זה במשך זמן רב, רוקן את המים במיכל המים והנח את המוצר במקום קריר ויבש.

מיחזור

בעת השלכת המוצרים המיועדים למיחזור, אין לזרוק אותם יחד עם האשפה הביתית הכללית, אלא למסור אותם למרכז המיחזור המיועד. כל אדם אחראי לשמירה על הסביבה.

אבחון תקלות

הפתרון	סיבות אפשריות	בעיה נפוצה
יש לטעון את המכשיר במשך יותר מ-4 שעות לפני השימוש	המכשיר נרכש לאחרונה או שלא נעשה בו שימוש במשך יותר משלושה חודשים	המכשיר אינו עובד או לא נדלק
החלף את הפיה	יש משהו חסום הפיה או שהיא מעוותת	לחץ המים נמוך מאוד בעבודה
נא לפנות לשירות הלקוחות.	הסוללה בסוף חייה	ניתן להשתמש בו רק לזמן קצר בעת טעינה
יש לטעון יותר מ-4 שעות לפני השימוש	זמן טעינה לא מספיק	בעת הטעינה, מחוון הטעינה אינו נדלק או מהבהב בצורה אקראית
יש לחבר את החשמל כהלכה	ספק הכוח אינו מחובר כהלכה	
יש להחליף את המתאם או לחברו ישירות לשקע ה-USB	אי-התאמה של מתאם החשמל (ראש הטעינה).	
נא לפנות לשירות הלקוחות.	מעגל המוצר פגום	
1. משוך החוצה את חור הפיה על יחידת שטיפת הראש. 2. מצוץ בחוזקה את הפיה	נרכש לאחרונה או לא נעשה בו שימוש לתקופה מסוימת.	אין לרסס מים בזמן העבודה

עצות בעניין שמירה על הסביבה

בעת השלכת המוצרים המיועדים למיחזור, אין לזרוק אותם יחד עם האשפה הביתית הכללית, אלא למסור אותם למרכז המיחזור המיועד. כל אדם אחראי לשמירה על הסביבה.




שיטת הפעלה:

- להפעלת המכשיר, לחץ על מקש ההפעלה-כיבוי, ברירת המחדל של מצב הפתיחה הוא מצב חלש, המחונן המתאים נדלק.
- לחץ והחזק למשך 2 שניות כדי להחליף מצב, המצב מועבר להילוך החזק, וחיווי מועבר גם לנורית החיווי המתאימה.
- לחץ לחיצה ארוכה למשך 2 שניות כדי להעביר את המצב לפעילות, והחיווי עובר גם לנורית החיווי המתאימה כדי להפעיל מחזור בתורו.
- לחץ על המקש לכיבוי המכשיר. המכשיר יכובה אוטומטית בחלוף 2 דקות.
- כאשר הסוללה של המכשיר טעונה, שלוש נוריות החיווי מהבהבות בתורן. כאשר הסוללה מלאה, שלוש נוריות החיווי תידלקנה במשך זמן רב.


שלבי השימוש




3. יש לסובב את מיכל המים מגוף המכשיר.

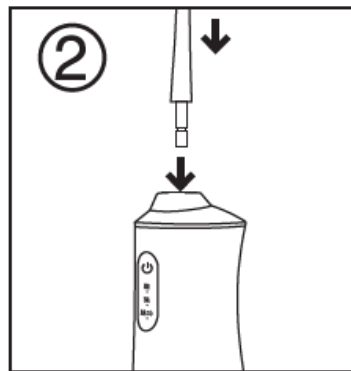


2. יש להכניס את פיית המצח המתאימה לידיית כדי להבטיח שהיא יציבה ולהימנע מדליפת מים במהלך השימוש.

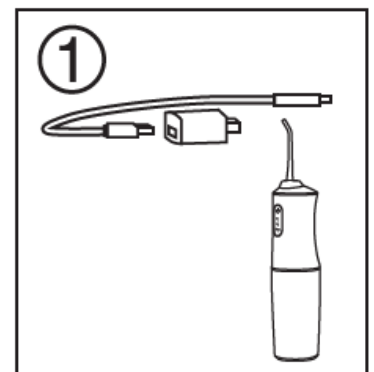

1. יש לטעון את המכשיר במלואו לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

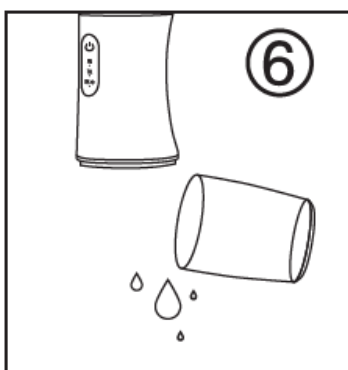

6. לאחר השימוש, פתח את המכסה האחורי כדי להסיר שאריות לחות.

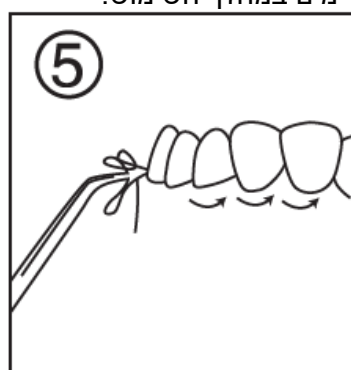

5. הכנס את הפיה לפה. יש ליישר ביחס למיקום שיש לשטוף.




4. יש להוסיף מים או תכשיר שטיפת פה למיכל. כמות המים תלויה בשימוש שלה.

שיטה נכונה לניקוי שיניים

בחר מהירות מתאימה. מומלץ לנסות אותו מהמהירות הנמוכה ביותר ולאט לאט למצוא את המהירות המתאימה ביותר. בעת ניקוי שיניים, הכנס את הפיה לפה, כוון אל הרווח בין השיניים או החניכיים ופתח מעט את הפה, כדי שהמים יוכלו לזרום החוצה בצורה חלקה.

כיוון את המהירות, יישר את החניכיים והתחל מהחלק הפנימי ביותר באותו כיוון (לדוגמה, 1 או 4) עד לשטיפת החניכיים של השן האחרונה. לאחר מכן יש להפוך את הפיה, ליישר אותה ביחס לחניכיים ולהמשיך לשטוף באותו כיוון (לדוגמה, 2 או 3) עד לשטיפת החניכיים של השן האחרונה. רצף השטיפה של שורת השיניים השנייה זהה לרצף אשר תואר לעיל.

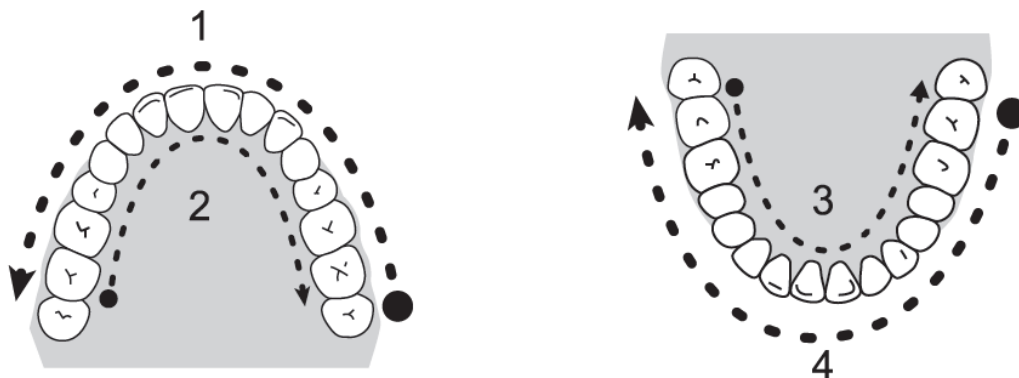


טיפים חשובים

רופאי שיניים ממליצים למשתמשים בפעם הראשונה במכשיר מסוג זה להשתמש במצב הרך למשך שבוע, ולאחר מכן לעבור להשתמש במצב הרגיל לאחר ההסתגלות. כדי להשתמש, יש ללחוץ על המתג. יש לשים לב לנקודות הבאות:

- (א) הזרימה אמורה להיות אנכית ביחס לשיניים או לחניכיים.
- (ב) יש לנוע לאט לאורך השיניים ולנקות אותן לפי הסדר.
- (ג) הפיה מיושרת באופן אנכי.
- (ד) יש לנקות היטב את השיניים, הסוגרים, הכתרים והתותבות.

בפעם הראשונה, אין לרסס מים ישירות לאורך כיס החניכיים. יש להשתמש לטווח ארוך למניעת אי-נוחות בחניכיים.

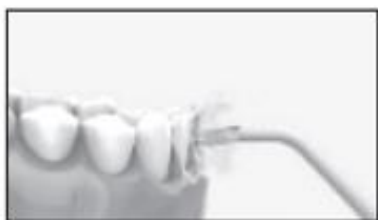

✓ הדגמה נכונה



✗ הדגמה שגויה

עצות בעניין המגע עם השיניים: יש להכניס את הפיה לפה לפני הפעלת המתג, כדי שהמים לא יותזו לכל עבר. בשימוש, המהירויות גדלות בהדרגה ממהירות חלשה לחזקה. יש לתת לחניכיים זמן הסתגלות, על מנת למצוא את המהירות המתאימה ביותר שהן יכולות לספוג.